

ミニラボウォッシャーD

MiniLabWasherD LMW-08D


簡単洗浄！ラクラク持運び！2.9kg！



ノズルは吸引ノズル・洗浄ノズルが一体化した
二重管構造を採用！あらゆる実験器具に対応します！

◆二重管構造とは

一般のノズルは吸引用と吐出用に分かれていますが、下記の様な二重管構造により「吸引用」と「吐出用」を一体化にしました。これにより一つのノズルで「洗浄液吸引」と「洗浄液吐出」が可能となりました。

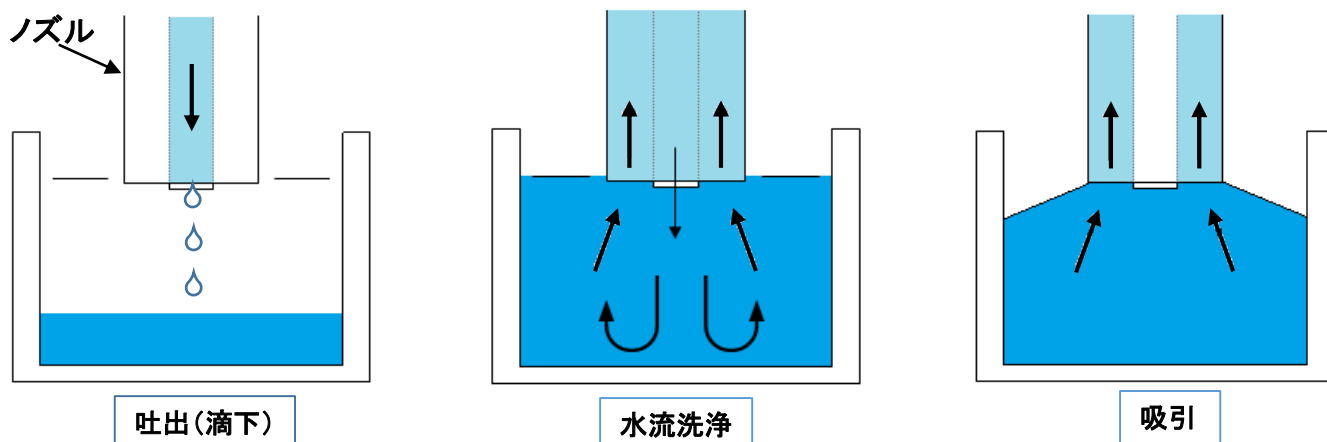

◆ノズル(リモートスイッチ付)

基本ノズルは下記の1×8列となります。オレンジのスイッチを押すとセットした秒数だけ洗浄します。但しモードを切替えると連続モードも有ります。下記ラインナップ以外も対応可能ですのでお気軽にご相談下さい。

ノズル	位置
1本	1×1列
2本	2×1列
8本	1×8列
16本	2×8列

・基本仕様 1×8列



・1×1列



◆オーダーメイド


このような洗浄器以外にも下記の様な**分注機などの製作も行っております。**

多種多様なご要望に合わせたオーダーメイドの実績がありますのでお気軽にご相談下さい。

12連自動分注機



4連自動分注機

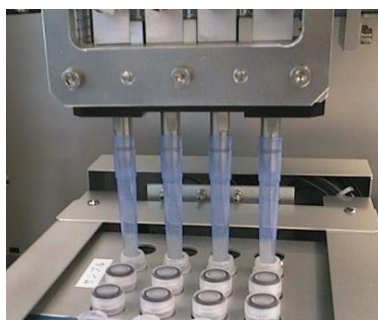

LMW-08D 本体セット仕様

■本体寸法	:幅226×奥行225×高さ200(mm)
■電源	:AC100V(50/60Hz)
■重量	:約2.9kg(洗浄水等除く)
■洗浄水・廃液ボトル	:プラスチック製(容量約1L)
■ノズル	:ノズル1×8本構成
■ノズルヘッド	:アクリル製(リモートスイッチ付)
■洗浄水量	:約1~2.3mL(ノズル1本当たり)
■洗浄水圧	:最大0.5kg/cm ²
■洗浄時間	:①時間設定モード0.1~99秒(9.9秒までは *2モード有 要切替 0.1秒、10秒以降は1秒間隔)②連続モード
■吸引圧	:最大-450mmHg

販売元

株式会社ライフテック

〒358-0014埼玉県入間市宮寺4074

TEL:04-2935-2711 FAX:04-2935-2710

<http://www.lifet.co.jp/>

*仕様・外観などについては予告なく変更することがあります。